

FOLHA ANEXA AO MANUAL DE UTILIZAÇÃO DA CADEIRA ACTION 2000

AJUSTES ESPECÍFICOS DA CADEIRA ACTION 2000 JUNIOR

1. PATINS - EFES (ESPIGÕES) + ELES / PATINS (DESCANSO PARA OS PÉS)

Nota : O sistema de destaque e fecho do patim é idêntico ao da Cadeira Action 2000 (ver § 8.7., página 28, do manual de utilização da Action 2000).



• Ajustes em altura (foto 1):

Retire parafuso hexagonal (A) e posicione o patim (placa preta) na altura desejada (em função dos furos de ajuste pré- determinados)
Alinhar os furos e colocar de novo o parafuso hexagonal e apertar sem forçar.

• Efes Ajustáveis de 0° a 30°:

Retirar o parafuso hexagonal (B) e colocar o ajuste (C) na posição 30° no tubo vertical do chassi (furo predeterminado). Alinhar os furos e voltar a colocar o parafuso hexagonal, e apertar com firmeza.

• Nota : A cadeira Action 2000 Junior é fornecida com efes ajustados a 0°

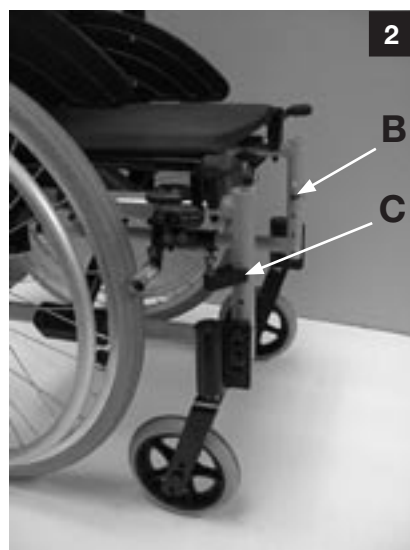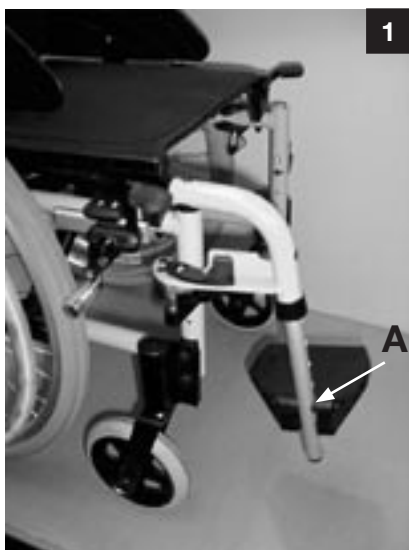

2. PATINS ELEVATÓRIOS

Nota : O patim elevatório é específico à cadeira de rodas Action 2000 Junior e não pode ser montado na cadeira Action 2000.

2.1. Destacáveis e rebatíveis :

Para os destacar , puxar simplesmente para cima. Para rebater, puxar na mesma ligeiramente para cima (uns 2 cm) e girar o “efe” para o interior ou para o exterior.

2.2. Ajustes :

- A inclinação do “efe” é ajustada nos entalhes das platinas, accionando o botão (A), ajustar o ângulo desejado em função dos encaixes, e apertar com firmeza.

- A altura da almofada da perna : Desapertar o botão (B), ajustar na altura desejada e apertar com firmeza

- A altura do patim : Desapertar botão (C), ajustar na altura desejada em função dos furos de ajustes pré- determinados e apertar com firmeza.

- A inclinação do patim é ajustável através do botão (D), desapertando o mesmo, ajustar no ângulo desejado em função dos encaixes e apertar com firmeza.

3. APOIOS DE BRAÇOS

3.1. Destacáveis :

Para destacar os apoios de braços , puxe simplesmente os mesmos para cima .

3.2. Ajustáveis em altura :

Retirar o parafuso hexagonal (E), ajustar à altura desejada (em função dos furos de ajuste pré- determinados), voltar a colocar o parafuso hexagonal, aperte o conjunto sem forçar.

